

ELIGARD

(leuprorelinacetat)

UPUTE ZA PRIPREMU

VERZIJA 4, STUDENI 2021




PROČITAJTE PRIJE MIJEŠANJA

Za cjelovite upute i informacije o lijeku pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

- ELIGARD smije pripremiti i primijeniti samo zdravstveni radnik.
- Ako lijek nije pripremljen pravilnim postupkom, ne smije se primijeniti nijednom bolesniku.
- Uvijek pričekajte da ELIGARD dosegne sobnu temperaturu prije miješanja (izvadite ga iz hladnjaka 30 minuta prije rekonstitucije).
- Primijenite ELIGARD potkožno odmah nakon rekonstitucije.
- Prijavljeni su slučajevi pogrešaka pri rukovanju, do kojih može doći u bilo kojem koraku pripreme, a koje mogu dovesti do izostanka djelotvornosti. Upute za rekonstituciju i primjenu moraju se strogo slijediti.
- U slučajevima sumnje na pogrešku pri rukovanju ili saznanja o pogrešci pri rukovanju prilikom primjene lijeka, potrebno je pratiti učinkovitosti lijeka ELIGARD mjereći razinu testosterona.

I. PRIPREMA ŠTRCALJKE B

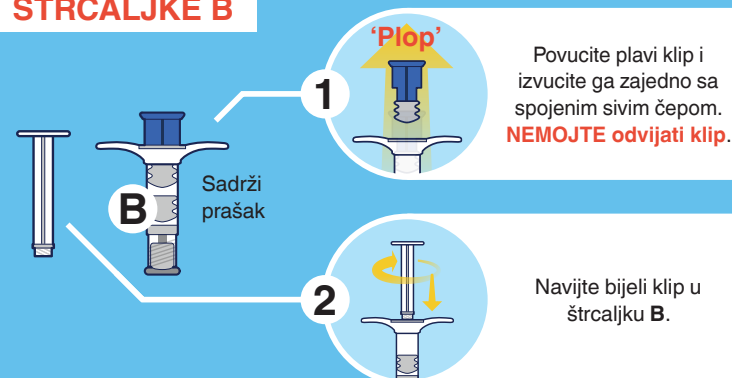


1 'Plöp' Povucite plavi klip i izvucite ga zajedno sa spojenim sivim čepom. **NEMOJTE odvijati klip.**

Sadrži prašak **B**

2 Navijte bijeli klip u štrcaljku **B**.


II. PRIPREMA ŠTRCALJKE A

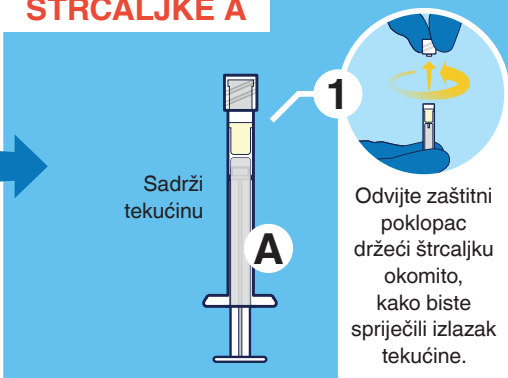

1 Sadrži tekućinu **A**

Odvijte zaštitni poklopac držeći štrcaljku okomito, kako biste spriječili izlazak tekućine.


III. SPAJANJE ŠTRCALJKI

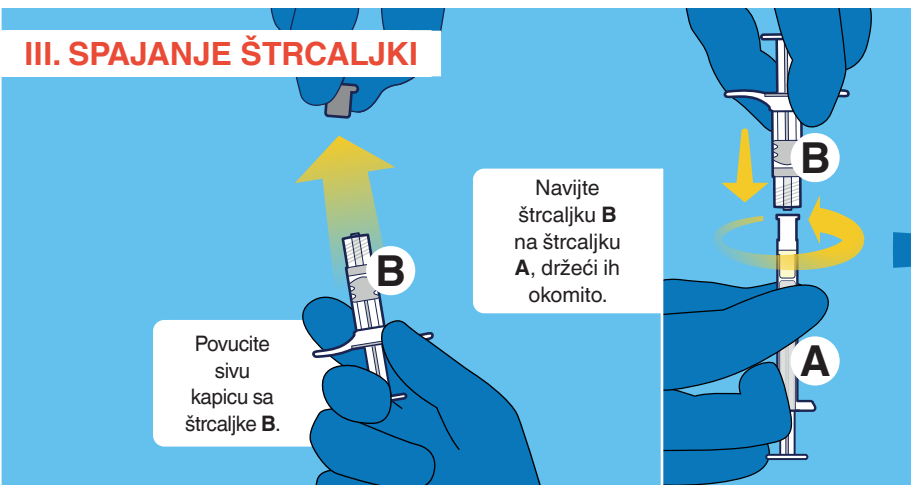

Povucite sivu kapicu sa štrcaljke **B**.

Navijte štrcaljku **B** na štrcaljku **A**, držeći ih okomito.

IV. MIJEŠANJE

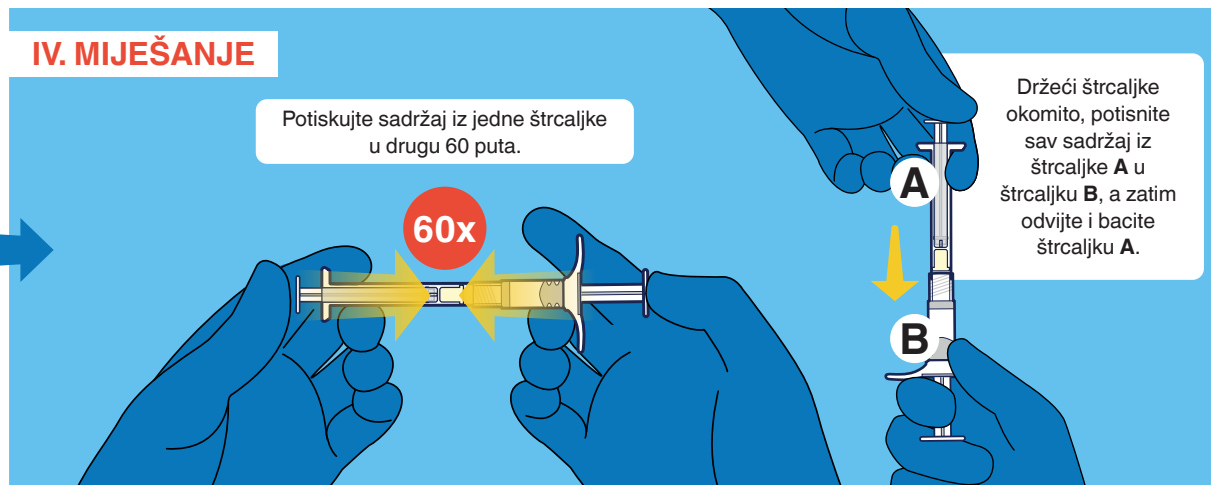


Potiskujte sadržaj iz jedne štrcaljke u drugu 60 puta.

60x

Držeći štrcaljke okomito, potisnite sav sadržaj iz štrcaljke **A** u štrcaljku **B**, a zatim odvijte i bacite štrcaljku **A**.

V. PRIMJENA

Pričvrstite sigurnosnu iglu na štrcaljku **B** držeći štrcaljku i nježno okrećući iglu u smjeru kazaljke na satu s približno tri četvrtine okreta dok igla ne bude stabilna. **Nemojte previše stegnuti spoj jer to može uzrokovati pucanje igle u njenom centralnom području i dovesti do istjecanja lijeka tijekom primjene.** Ako se centralno područje igle ošteti, treba primijeniti novi lijek.

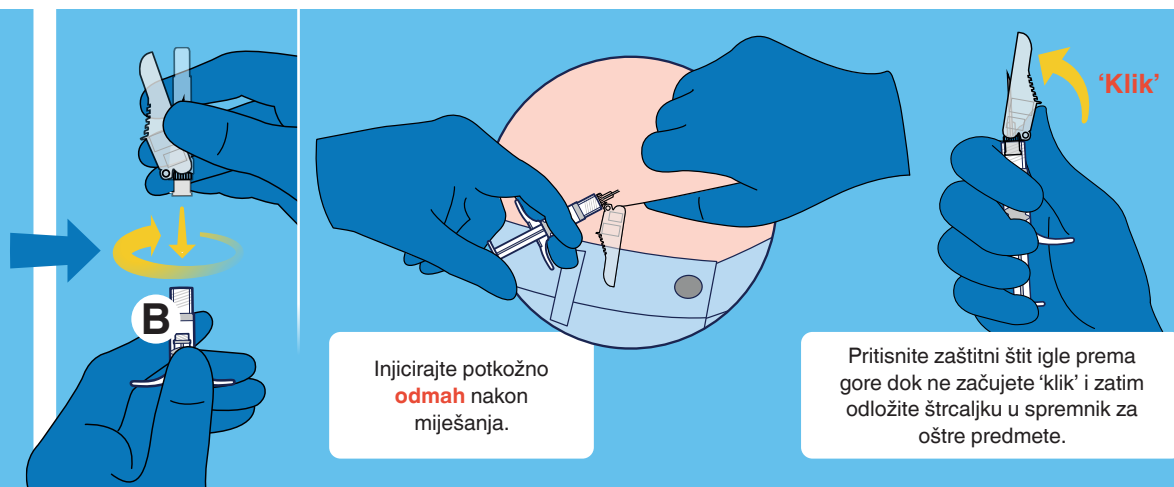

Injicirajte potkožno **odmah** nakon miješanja.

Pritisnite zaštitni štít igle prema gore dok ne začujete 'klik' i zatim odložite štrcaljku u spremnik za oštre predmete.

PRIJAVLJIVANJE NUSPOJAVA

- Sve slučajeve nepravilnog čuvanja, pripreme, rekonstitucije i primjene lijeka ELIGARD ili bilo kakve nuspojave treba prijaviti izravno društvu Altamedics d.o.o., lokalnom predstavniku Nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj, tvrtke Recordati ili putem nacionalnog sustava prijave nuspojave: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.
- Slučajevi se mogu prijaviti putem elektroničke pošte (info@altamedics.hr) ili telefona (+385 (0)1 3702 860) te poštom na adresi društva Altamedics d.o.o., Vrbanj 4, 10110 Zagreb.