


Zagreb, 15.01.2014.

**Povlačenje proizvoda iz uporabe**Proizvod: Cyto-Set  
Ref. br.: A1686  
Serijski broj: 3K14340000

Poštovani,  
Tijekom interne provjere kvalitete otkrili smo da ovi intravenski setovi u nekim slučajevima nakon odspajanja na beziglenom pripoju Y oblika mogu propustati tekućinu. Bezigleni pripoj vjerojatno se ne zatvara potpuno (vidi sliku).

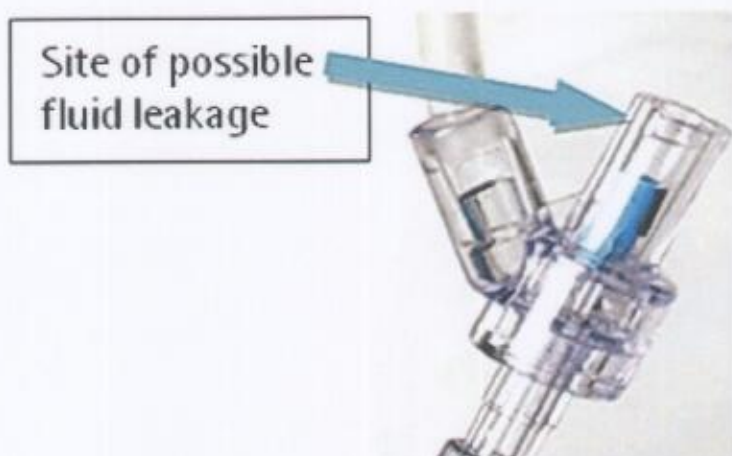

Silikonski disk se ne vraća u položaj zatvaranja nakon odvajanja od Luer navoja. Nekorišteni ili potpuno povezani ventili ne pokazuju ovakav defekt.

Stoga smo odlučili povući gore navedenu seriju proizvoda kao mjeru predostrožnosti. Prema našoj informaciji, Vaša je bolnica primila **Cyto-Set** navedene serije.

Molimo Vas da prestanete s uporabom Cyto-Setova oštećene serije te da ih vratite tvrtki B.Braun. Usporedno s ovom informacijom, kontaktirati će Vas naši prodajni predstavnici radi logističke potpore.

Molimo Vas da odmah prosljedite ovu informaciju korisnicima unutar svoje bolnice.

Ispričavamo se za moguće neugodnosti koje smo izazvali.

Molimo Vas da potvrdite primitak ove informacije.

Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo obratite se na telefon 01 7789 444 ili putem e-pošte [branka.bogic@bbraun.com](mailto:branka.bogic@bbraun.com)

S poštovanjem,  
Branka Bogić, mr ph *Branka Bogić*  
Odgovorna osoba za vigilanciju medicinskih proizvoda